

Keeler Loupe






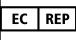










فریم

د استعمال لارښوونې

Keeler

– A world without vision loss –

- ۱- د استعمال لپاره نېټې ۲
- ۱-۱ خبرداري او احتیاطونه ۲
- ۲-۱ منع کونکي موارد ۳
- ۲- د مېکروبوټو څخه د پاکونې لارښوونې ۴
- ۳- د لوپ فریم برابرول او ترینه استفاده کول ۴
- ۴- تخنیکي مشخصات ۶
- ۵- پرزه جات و جاتیي لوازم ۶
- ۶- ضمانت ۶
- ۷- د پېکج او غورځولو معلومات ۷

عمومي اخطاري نېنه		د استعمال لارښوونې وگورئ	
Conformité Européene		د تولید نېټه	
د تودوخي حد		د تولیدونکي نوم او ادرس	
په اروپايي ټولنه کې جواز لرونکي نماینده		د تولید هېواد	
د گېټلاگ شمېره		د ناکاره برېښنایي او الیکترانیکي تجهیزاتو (WEEE) بیا کارول	
د بڼدل کود		له دې ځای پاس خوا ته	
د اتموسفیر فشار حد		وچ یې وسائې	
د نمجنتیا حد		نازک	
ژباړه		که پېکج ته زیان رسېدلی وي نو مه یې کاروئ	

کیلر لوپ (Keeler Loupe) فریم د 93/42/EEC، قاعده (اروپايي ټولنه) ۲۰۱۷/۲۴۵ او د روغتیايي آلاتو د کیفیت د مدیریت سیستمونو ISO 13485 تر مخې طرح او جوړ شوی دی.

درجه بندي: CE: کلاس I

FDA: کلاس II

په دې لاسی کتاب کې ورکړل شوی معلومات باید د تولیدونکي مخکې لیکل شوي منظوري پرته په بشپړ يا برخه کې بیا چاپ نه کړای شي. د محصول دوامداره پرمختګ لپاره زموږ د تگلارې د يوې برخې په توګه موږ تولیدونکي حق لرو چې پرته له مخکې خبرتیا څخه په دې سند کې شامل مشخصاتو او نورو معلوماتو ته بدلون ورکړو.

دا Keeler UK او Keeler USA په ویب پاڼو کې هم شتون لري.

د چاپ حقوق © Keeler Limited 2021 په ۲۰۲۱ کې په برطانیه کې چاپ شوی.

۱- د استعمال لپاره نېنې

ټاکل شوی استعمال / د آلي مقصد

کیلر لوپس (Keeler Loupes) او فریمز (Frames) په مختلفو کلینیکي ترتیباتو کې د کارولو لپاره دي په شمول خو تر دې کارونکو ته محدود ندي د غاښونو درملتونونو کې، د سترګو د درملنې په کلینیکونو، د جراحي په تیاترونو، روغتونونو کې، د ځناورو د درملنې مرکزونو، شخصي مشورو په ځونو او د جراحي په چاپیریالونو کې او د روزل شویو محصلینو او تجربه لرونکو مسلکيانو لخوا کارول کيږي.

۱-۱ خبرداري او احتیاطونه

مهرباني وکړئ په یاد وسائې چې زموږ د آلاتو مناسب او خوندي فعالیت یوازې تضمین دی که چیرې دواړه آلات او د دوی پرزي په ځانګړي ډول د Keeler Ltd لخوا جوړ شوي وي.

لاندي احتیاط مشاهده کړئ ترڅو د لوپس خوندي چلېت دامن شي.

خبرداري

- مهرباني وکړئ په یاد وساتئ چې زموږ د آلاتو مناسب او خوندي فعالیت یوازې تضمین دی که چیرې دواړه آلات او د دوی پرزي په ځانگړي ډول د Keeler Ltd لخوا جوړ شوی وي.
- د کارولو څخه وړاندې وگورئ چې ستاسو د Keeler محصول ته په انتقال / زېرمه کې د رسېدلي زیان کومې نښې خو نشته.
- که محصول ته په ښکاره ډول کوم زیان رسېدلی وي نو مه یې کاروئ او وخت په وخت یې د زیان یا ناوړه ډول د کارول کېدا نښې نښانو لپاره معاینه کوئ.
- د متحده ایالاتو د فدرالي قانون له مخې یواځې ډاکتران یا روغتیايي کارمندان اجازه لري چې دا آله خرڅه کړي یا په فرمان خرڅه شي.
- دا آله یواځې په مناسب ډول روزل شویو او جواز لرونکو روغتیايي مسلکيان لخوا د کارول کېدا لپاره جوړه شوي ده.
- دا محصول باید په مایعاتو کې ډوب نه کړای شي.

احتیاط

- یوازې د Keeler اصلي تصویب شوي پرزي او اړوند شیان ورسره وکاروئ کله نو د آلي خونديتوب او فعالیت په بد ډول اغېزمنېدلی شي.
- دا آله په داسې چاپېریال کې په خوندي توگه کار کولو لپاره طرحه شوې ده چې د تودوخې کچه یې له $10^{\circ}\text{C} +$ تر $35^{\circ}\text{C} +$ په منځ کې وي.
- د ماشومانو د رسیدني څخه یې لرې وساتئ.
- د ټینگېنت د جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره، د کارونې څخه وړاندې آله پرېږدئ چې د خونې د تودوخې کچې ته راشي.
- یوازې د چټ لاندې کارولو لپاره (له نمجنټیا څخه یې وساتئ).
- آله کې دننه داسې هېڅ پرزي نشته چې کارونکي یې په خپله ساتنه یا صفایي ترسره کړي. د نورو معلوماتو لپاره مجاز خدمت وړاندې کوونکي سره تماس ونیسئ.
- په دې IFU کې ورکړل شوي د عادي خیال ساتنې د لارښوونو تعقیب کې پاتې راتلني په پایله کې ښايي د دې تولید عملياتي موده راکمه شي.
- د محصول د کارونې مودې په پای کې محصول د محلي چاپېریال لارښوونو (WEEE) سره وغورځوئ.

۱-۲ منع کوونکي موارد

- هېڅ کوم ممانعت نشته چې دا آله د ناروغانو کوم نفوس سره کارول کېدې شي، پرته له هغو ممانعتونو چې لاندي په لنډ ډول ورکړل شوي دي.
- کیلر لوپ او فریم د کاروونکي د نظر ډگر او ژوروالی رامحدودوي، او په ښکاره توگه لیدلو لپاره یې مجبوروي چې سر او ورمېر په غیرعادي ډولونو ونیسي تر څو ښه ویني.

۲- د مپکروبوونو څخه د پاکونې لارښوونې

د دی الی د پاکونې لپاره باید یوازې نه د یوونکی د پاکوالي مواد څنګه چې تشریح شوي وکارول شي. په پخار یې مه پاکوئ او نه یې د پاکونې په مایعاتو کې ډوبوئ.


- ۱- بهرنی سطح د یو داسې توکر سره پاک کړئ چې پاک، جذبونکی، او ذرات نه غورځوونکی وي او د یونونو څخه پاکو شویو اوبو (de-ionised) / د پاکونې ډیټرجنټ محلول (په حجم ۲٪ ډیټرجنټ) سره یا اوبو / آیسوپروپایل الکولي محلول (په حجم د 70% IPA) سره لوند کړل شوی وي. عینسه یزې سطحو څخه ښه وکړئ.
- ۲- ډاډ ترلاسه کړئ چې اضافي محلول آلی ته دننه لار نه شي. احتیاط څخه کار واخلئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې توکر محلول څخه لوند نه دی.
- ۳- سطحي باید په لاس د یوې پاکې ذرات نه پرېښوونکي توکر سره په احتیاط سره پاکي کړای شي.
- ۴- کارول شوي د پاکونې مواد په خوندي ډول وغورځوئ.

۳- د لوپ فریم برابرول او ترینه استفاده کول

- ۱- لکه څنګه چې ښودل شوي د پڼ ماونټنګ سیسټم له لارې فریم ته د لوپ واحد سم کړئ.



- ۲- ساتونکی پوښ خپل ځای هغه شان وروستل کيږي لکه څرنګه چې ښیل شوي دي.

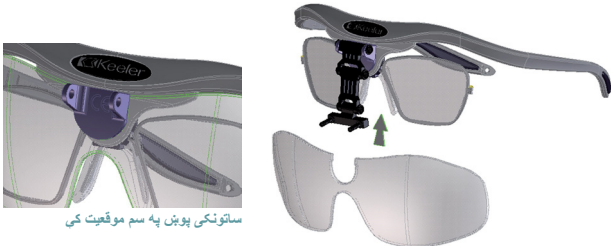

ساتونکی پوښ په سم موقعیت کې

۳- د نسخه شوي عدسي فریم په بنودل شوي ډول لگول کيږي.




ساتونکی پوښ په سم موقعیت کې



۵- په پوزه کېناستونکي برخه خپل موقعیت ته وروستلو لپاره جندره کېدونکي کامره هم هغه شان تاو کړئ چې څرنګه بنودل شوي ده.

۴- په پوزه کېناستونکي برخي ته تغیر ورکولو لپاره، جندره کوونکي کامره هم هغه شان تاو کړئ چې څرنګه بنودل شوي تر څو په پوزه کېناستونکي برخه خوشي شي. بیا ممکنه وي چې په پوزه کېناستونکي برخه خپل سم ځای ته ورکش کړای شي.

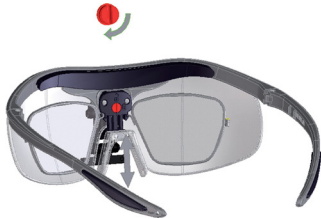

۶- د کاروونکي سر ته په خوندي توګه د فریم د ورلګولو لپاره، لاستی کش یو آرامه موقعیت خوا ته وښویوئ



۴- تخنیکي مشخصات

چاپیریالی شرایط:

وکارول	
۱۰ گرامه، موده ۶ میاشتی	تکان (د پیکنگ پرته)
د زېرمه کولو شرایط	
۱۰ گرامه، موده ۶ میاشتی	تکان
د لپېرد شرایط	
۱۰ گرامه، موده ۶ میاشتی	تکر
۱۰ گرامه، موده ۵/۵: 500 Hz 10 څخه تر	رېښنه، سینوسی کوروالی

۵- پرزه جات و جانبی لوازم

د برخی شمېره	توکی
2199-P-7259	د جراحی لوپس لپاره د سر پتی
2199-P-7523	د سر نسمة
2199-P-7136	په بټوه کې د های ټېک لینز توکر

۶- ضمانت

هیڅ پرزه یې د ترمیم وړ نه ده - د ستونزو د مخنیوي او د ترمیم یعنی سروس ټولې چارې باید د مجار Keeler نماینده لخوا ترسره شي.

ستاسو د کیلر محصول د ۳ کالونو ضمانت لري او د دغه شرایطو لاندې به یې له کوم څرخ بل درکړل شي، یا مرمت کړای شي:

- د ناقصې جوړونې له امله کومه خرابتيا
- چې آله او اضافي آلات دلته ورکړل شويو لارښوونو سره په سمون کې کارول شوي وي.
- د دعوي سره د پېرودني ثبوت مل وي.

۷- د پېکج او غورځولو معلومات

د برېښنايي او اليکترانيکي تجهيزاتو غورځونه

په توليد يا د توليد په پېکج باندې دا نخښه ښيي چې دغه توليد سره د عامې کورنۍ خخلې په شان چلند وه نه شي.



په چاپېريال د WEEE (ناکاره شوي برېښنايي اليکترانيکي تجهيزات) تاثير راتېټولو او د WEEE د غورځولو لپاره په ځمکه کې کېنډل شويو ځايونه کې غورځونو اندازه راتېټولو په موخه مور تاسې ته تشويق درکوي چې د دې آلي د عمر په پای کې بايد دا ريسايکل شي او بيا وکارول شي.

که تاسو ته د بيا کارونې او ريساکل کولو لپاره د راتولوني په اړه نور معلومات پکار دي نو مهرباني وکړئ په B2B کمپلاینس باندې ۰۱۶۹۱۶۷۶۱۲۴ (+۴۴ ۱۶۹۱ ۶۷۶۱۲۴) ته ټيليفون وکړئ. (بوازي برطانيه).

که د آلي په هکله کومه چدي پېښه رامنځته شي نو بايد راپور يې توليدوونکي او د ستاسو په غړی هېواد کې مجازي ادارې ته ورکړل شي.

تماس

تولیدوونکی

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK



۰۸۰۰ ۵۲۱۲۵۱ وریا تیلیفون
+۴۴ (۰) ۱۷۵۳ ۸۵۷۱۷۷ تیلیفون
+۴۴ (۰) ۱۷۵۳ ۸۲۷۱۴۵ فیکس

چین کی دفتر

Halma China Group
名称: 沃迈 (上海) 机电有限公司
地址: 上海市闵行区金都路1165弄
123号23幢一号厂房三层B座
电话: 021-6151 9025

پہ متحدہ ایالاتو کی د خرخلو دفتر

Keeler USA
Phoenixville Pike 3222
Building #50
Malvern, PA 19355 USA
۱ ۸۰۰ ۵۲۳ ۵۶۲۰ وریا تیلیفون
۱ ۶۱۰ ۳۵۳ ۴۳۵۰ تیلیفون
۱ ۶۱۰ ۳۵۳ ۷۸۱۴ فیکس

ہند کی دفتر

Keeler India
.Halma India Pvt. Ltd
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
INDIA
+۹۱ ۲۲ ۴۱۲۴ ۸۰۰۱ تیلیفون

Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain

EC

REP

۲۰۲۱/۰۵/۱۲ د صادرونی نیپہ

EP59-19025 Issue C

Keeler

– A world without vision loss –