

Ramă pentru lupe Keeler

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CUPRINS

1. INDICAȚII DE UTILIZARE	2
1.1 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII.....	2
1.2 CONTRAINDICAȚIE.....	3
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA	4
3. MONTAREA ȘI UTILIZAREA RAMEI PENTRU LUPE	4
4. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	6
5. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII.....	6
6. GARANȚIE.....	6
7. INFORMAȚII PRIVIND AMBALAREA ȘI ELIMINAREA.....	7

	Consultați instrucțiunile de utilizare		Indicator general de avertizare
	Data fabricației		Conformitate Europeană
	Numele și adresa producătorului		Limită de temperatură
	Țara de fabricație		Reprezentat autorizat în Comunitatea Europeană
	Reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)		Număr de catalog
	Sus		Cod lot
	A se menține uscat		Interval de presiune atmosferică
	Fragil		Interval de umiditate
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat		Traducere

Rama pentru lupe Keeler este proiectată și construită în conformitate cu Directiva 93/42/CEE, Regulamentul (UE) 2017/745 și standardul ISO 13485 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității.

Clasificare: CE: Clasa I

FDA: Clasa II

Este interzisă reproducerea, integrală sau parțială, a informațiilor conținute în acest manual fără permisiunea scrisă prealabilă a producătorului. Ca parte a politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului noi, producătorul, ne rezervăm dreptul de a opera modificări ale specificațiilor și ale altor informații conținute în prezentul document fără notificare prealabilă.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt disponibile și pe site-urile Keeler UK și Keeler USA.

Copyright © Keeler Limited 2021. Publicat în Regatul Unit, 2021.

1. INDICAȚII DE UTILIZARE

Utilizare preconizată/scopul instrumentului

Lupele și ramele Keeler sunt destinate utilizării în diferite medii clinice inclusiv, dar fără a se limita la utilizatori din cabinete stomatologice, clinici oftalmologice, săli de operație, spitale, cabinete veterinare, cabinete medicale și medii chirurgicale și la utilizarea de către studenți care au beneficiat de cursuri de formare și de profesioniști cu experiență.

1.1 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII

Rețineți că funcționarea adecvată și în siguranță a instrumentelor noastre este garantată doar dacă atât instrumentele, cât și accesoriile provin exclusiv de la Keeler Ltd.

Respectați următoarele precauții pentru a asigura operarea în siguranță a ramei pentru lupe.



ATENȚIONĂRI

- Rețineți că funcționarea adecvată și în siguranță a instrumentelor noastre este garantată doar dacă atât instrumentele, cât și accesoriile provin exclusiv de la Keeler Ltd.
- Înainte de utilizare, verificați produsul Keeler pentru depistarea semnelor de deteriorare la transport/depozitare.
- Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat și verificați-l periodic pentru depistarea semnelor de deteriorare sau de utilizare greșită.
- Legislația federală a SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv doar de către sau la recomandarea unui medic.
- Acest dispozitiv este destinat a fi utilizat doar de profesioniști din domeniul sănătății instruiți în mod corespunzător și autorizați.
- Acest produs nu trebuie imersat în lichide.



ATENȚIE

- Utilizați doar componente și accesorii originale aprobate de Keeler, în caz contrar siguranța și performanțele dispozitivului pot fi compromise.
- Produsul a fost proiectat să funcționeze în siguranță când temperatura ambiantă este între +10 °C și +35 °C.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Pentru a împiedica formarea condensului, lăsați instrumentul să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.
- Exclusiv pentru utilizare în spații interioare (a se proteja împotriva umezelii).
- În interior nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul de service autorizat.
- Neefectuarea întreținerii curente recomandate conform instrucțiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare poate reduce durata de viață operațională a produsului.
- La sfârșitul duratei de viață utilă a produsului eliminați-l în conformitate cu orientările locale privind mediul (DEEE).

1.2 CONTRAINDICAȚIE

Nu există restricții privind populațiile de pacienți; acest dispozitiv poate fi utilizat împreună cu alte dispozitive cu excepția celor evidențiate în contraindicația menționată mai jos.

Lupele și cadrul Keeler limitează câmpul vizual și profunzimea acestuia, ceea ce vă forțează să adoptați poziții incomode ale capului/gâtului pentru a vedea clar.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

Pentru acest instrument trebuie utilizată doar curățarea manuală, fără imersare, conform descrierii. Nu autoclavați și nu imersați în lichide de curățare.


1. Ștergeți suprafața exterioară cu o lavetă absorbantă curată, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție de apă deionizată/detergent (concentrație de detergent de 2% din volum) sau soluție de apă/alcool izopropilic (IPA cu concentrație de 70% din volum). Evitați suprafețele optice.
2. Asigurați-vă că excesul de soluție nu pătrunde în instrument. Aveți grijă și asigurați-vă că laveta nu este saturată cu soluție.
3. Suprafețele trebuie uscate cu atenție, manual, folosind o lavetă curată care nu lasă scame.
4. Eliminați în condiții de siguranță materialele de curățare utilizate.

3. MONTAREA ȘI UTILIZAREA RAMEI PENTRU LUPE

1. Montați lupa pe cadrul cu ajutorul sistemului de montare cu știfturi, așa cum se arată în imagine.



2. Ecranul protector se montează prin apăsarea acestuia pe poziție așa cum se arată în imagine.

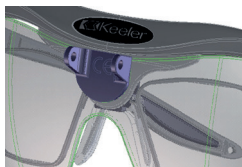

Ecran protector în poziție corectă

3. Rama pentru lentile de vedere se montează dacă este necesar așa cum se arată în imagine.



Ecran protector în poziție corectă

4. Pentru a regla puntea nazală, rotiți cama de blocare în poziția arătată în imagine pentru a elibera puntea nazală. Puntea nazală poate fi apoi deplasată în poziția necesară.



5. Blocați puntea nazală pe poziție prin rotirea camei de blocare în poziția arătată.




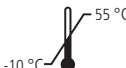







6. Pentru a fixa bine rama pe capul utilizatorului, deplasați bila de fixare indicată într-o poziție confortabilă



4. SPECIFICAȚII TEHNICE

Condiții de mediu:

UTILIZARE	
  	
Șoc (fără ambalaj)	10g, durata 6 ms
CONDIȚII DE PĂSTRARE	
  	
CONDIȚII DE TRANSPORT	
  	
Vibrație, sinusoidală	10 Hz-500 Hz: 0,5g
Șoc	30g, durata 6 ms
Lovire	10g, durata 6 ms

5. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Articol	Număr piesă
Bandă de fixare pe cap pentru lupe chirurgicale	2199-P-7259
Curea de fixare pe cap	2199-P-7523
Lavetă pentru lentile de înaltă tehnologie cu toc	2199-P-7136

6. GARANȚIE

Nu există componente care pot fi reparate de utilizator – toate lucrările de întreținere preventivă și de service trebuie realizate doar de reprezentanți autorizați de Keeler.

Produsul dumneavoastră Keeler este garantat pentru o perioadă de 3 ani și va fi înlocuit sau reparat gratuit în următoarele condiții:

- Orice defecțiune cauzată de un defect de fabricație.
- Instrumentul și accesoriile au fost utilizat în conformitate cu prezentele instrucțiuni.
- Orice reclamație este însoțită de dovada achiziției.

7. INFORMAȚII PRIVIND AMBALAREA ȘI ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice uzate



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său și instrucțiunile aferente indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer.

Pentru a reduce impactul DEEE (deșeurilor de echipamente electrice și electronice) asupra mediului și pentru a minimiza volumul de DEEE care ajung la gropile de gunoi, încurajăm reciclarea și reutilizarea acestui echipament la sfârșitul duratei de viață a produsului.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind colectarea, reutilizarea și reciclarea, vă rugăm să contactați B2B Compliance la numărul 01691 676124 (+44 1691 676124). (Doar în Regatul Unit).

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie adus la cunoștința producătorului și a autorității competente din statul dumneavoastră membru.

Contact



Producător

Keeler Limited
Clewer Hill Road



Windsor
Berkshire
SL4 4AA Regatul Unit

Număr de telefon gratuit 0800 521251

Tel. +44 (0) 1753 857177

Fax +44 (0) 1753 827145

Sediu vânzări SUA

Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 SUA

Număr de telefon gratuit

1 800 523 5620

Tel. 1 610 353 4350

Fax 1 610 353 7814

Sediu China

Halma China Group
名称: 沃迈 (上海) 机电有限公司
地址: 上海市闵行区金都路1165弄
123号23幢一号厂房三层B座
电话: 021-6151 9025

Sediu India

Keeler India
Halma India Pvt. Ltd.
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
INDIA
Tel. +91 22 4124 8001



Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spania

EP59-19025 Ediția C

Data publicării 12/05/2021

Keeler
– A world without vision loss –